



吸引式ユニット電極の接続時の注意点

(写真1) 固定部の締めがゆるい。

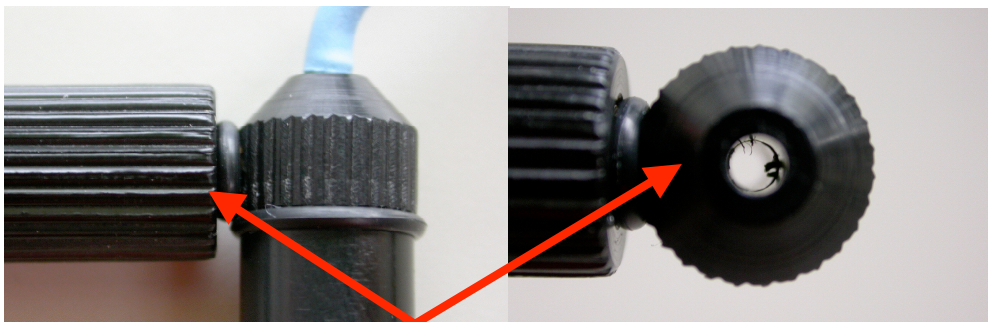


締めが甘いため、電極固定のネジが電極に接触せずに通電不良をおこします。

(写真2) 固定部の締めがきっちりと止まっている。

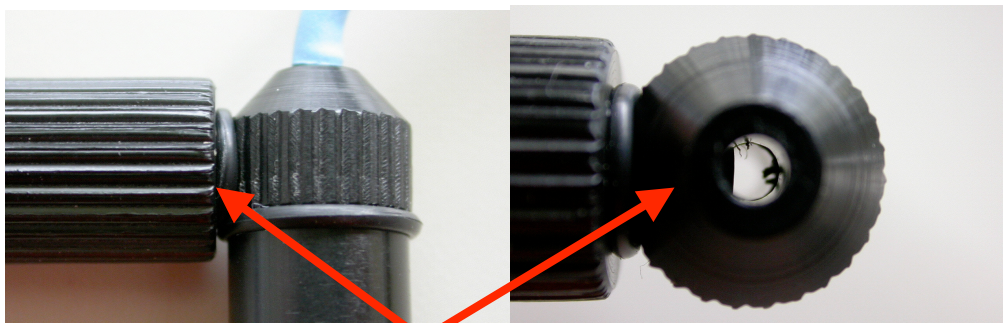

写真のように固定のネジの先端が電極に接触するように締め付けてください

(写真3) 注意点

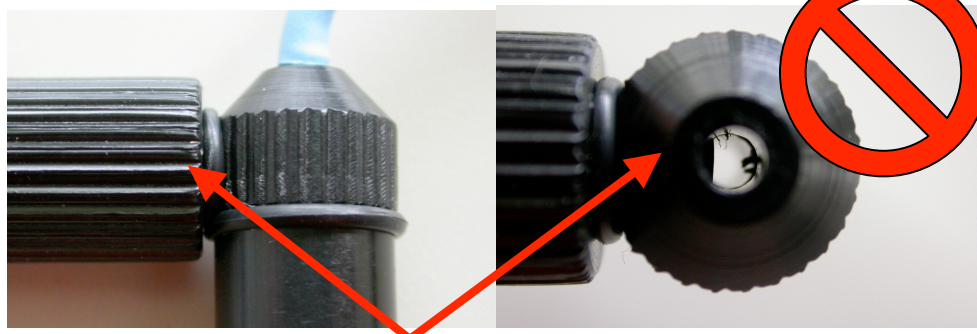

電極固定具をきつく締めすぎるとコネクターネジ山が潰れたり、電極を破損させることがあります。ご注意ください。

☆ ご参考までに

(吸引式凝固電極セット通電確認方法)

生理食塩水を含ませたガーゼを用い、通電を行いながら電極を軽くなでて下さい。「ジュッ」と反応があればセットできていることが確認出来ます。



80036038_て 38

(8006)80036038(10)200706